

Collo e décolleté  
Neck and décolleté



Tecnica lineare  
3-5 sedute  
ogni 15/30 giorni  
(a seconda del  
fotoinvecchiamento)

Linear technique  
3-5 sessions  
every 15/30 days  
(depending on  
photoaging)


Dorso delle mani  
Back of hands



Tecnica lineare  
retrograda + depositi  
ogni 15/30 giorni  
(a seconda del  
fotoinvecchiamento)

Retrograde linear  
technique + depots  
3-5 sessions  
every 15/30 days  
(depending on  
photoaging)

Viso e contorno occhi  
Face and around eyes

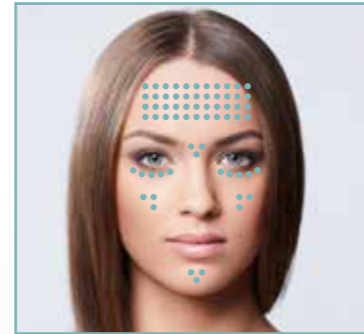

Tecnica lineare  
retrograda + depositi  
ogni 15/30 giorni  
(a seconda del  
fotoinvecchiamento)

Retrograde linear  
technique + depots  
3-5 sessions  
every 15/30 days  
(depending on  
photoaging)



SIRINGA PRE-RIEMPITA MONOUSO DA 2 ML

Acido ialuronico 20 mg/ml  
a peso molecolare 1,0-1,5 x 10<sup>6</sup> Dalton  
2 aghi 30G ½" attacco LUER-LOCK CE 0050

DISPOSITIVO MEDICO DI CLASSE III CE 1014



PRE-FILLED DISPOSABLE 2 ML

Hyaluronic acid 20 mg/ml  
molecular weight 1,0-1,5 x 10<sup>6</sup> Dalton  
2 needles 30G ½" connection LUER-LOCK CE 0050

MEDICAL DEVICE III CLASS CE 1014

HYDRO

## Filler Cross-linkato Cross-linked Hyaluronic Dermal Filler



### UNA NUOVA GENERAZIONE DI FILLER PER IL TRATTAMENTO DELLE IMPERFEZIONI DEL VISO A BASE DI ACIDO IALURONICO RETICOLATO

EVRYAL è un filler sterile ad alta tollerabilità, viscoelastico, a base di acido ialuronico reticolato, ideale per applicazioni sottocutanee.

L'azione di EVRYAL si esplica nell'aumento del volume del tessuto dermoepidermico basato sulla naturale capacità delle molecole idrofiliche di acido ialuronico di richiamare una moderata quantità di acqua e legarsi a questa. Ciò permette di integrare la matrice intercellulare, riempiendo gli spazi intradermici, conferendo turgidità ai tessuti. La reticolazione dell'acido ialuronico contenuto nel prodotto rende l'effetto di riempimento più stabile e durevole nel tempo. Infatti a differenza dell'acido ialuronico lineare, EVRYAL viene lentamente riassorbito dalla pelle nel giro di 6-8 mesi, donando alla cute trattata un aspetto naturale più a lungo. Il BDDE, usato come agente reticolante, oltre ad essere sicuro, offre risultati efficienti rispettando le richieste del mercato.

EVRYAL è un dispositivo medico marcato CE 0373 iniettabile, apirogeno, riassorbibile, a base di acido ialuronico reticolato di origine non animale, prodotto tramite fermentazione batterica. Si presenta in forma di gel incolore monofasico contenuto in una siringa monouso di vetro pre-riempita, ergonomica, con raccordo Luer.

La siringa, dotata di un supporto in plastica che ne aumenta la maneggevolezza, presenta una gradazione precisa che permette un controllo diretto e una facile lettura del volume del prodotto iniettato.

I controlli effettuati durante l'intero processo produttivo e nel corso del confezionamento, basati sull'utilizzo di metodi tecnologicamente all'avanguardia che prevedono la verifica elettronica di tutti i filler prodotti, assicurano qualità e purezza, garantendo la sicurezza del prodotto. Tali standard produttivi in aggiunta alla bassissima concentrazione di acidi nucleici e proteine ed a un tasso di endotossine batteriche < 0,5 EU/ml (decisamente inferiore ai limiti della Farmacopea Europea per i prodotti iniettabili) riducono al minimo eventuali reazioni di ipersensibilità.



### A NEW GENERATION OF CROSS-LINKED HYALURONIC ACID FILLERS FOR THE TREATMENT OF SKIN BLEMISHES

EVRYAL is a sterile, highly tolerated, viscoelastic filler made with cross-linked hyaluronic acid, ideal for subcutaneous applications.

EVRYAL helps increase the volume of the dermo-epidermal tissue thanks to the natural ability of hydrophilic hyaluronic acid molecules to attract a moderate amount of water molecules and bond with them. This allows the integration of the intercellular matrix, whilst filling intradermal spaces and making the tissues firmer.

The cross-linked hyaluronic acid contained in the product makes this filling effect longer lasting and more stable. In fact, unlike linear hyaluronic acid, the skin slowly absorbs EVRYAL in 6 to 8 months, looking more natural for longer. In addition to safety, BDDE – the cross-linking agent – provides effective results, thereby meeting market requirements.

EVRYAL is a CE 0373 injectable, apyrogenic, resorbable medical device made with cross-linked hyaluronic acid created from non-animal sourced bacterial bio-fermentation.

It is a colourless monophasic gel contained in a disposable pre-filled, ergonomic syringe with a Luer Lock adapter.

The syringe is equipped with a plastic support that makes it easy to handle. Its accurate graduation allows you to control and read the volume of injected product.

Electronic verifications carried out throughout the entire filler production and packaging process, based on the use of state of the art technology, ensure quality, purity, and safety. These production standards, together with the extremely low concentration of nucleic acids and protein, and the bacterial endotoxin rate < 0.5 EU/ml (much lower than the limit established by the European Pharmacopoeia for injectable products) minimise any hypersensitivity reaction.




## STUDI CLINICI

Uno studio pre-clinico condotto da dieci specialisti (dermatologi, chirurghi plastici e medici estetici) su 145 pazienti (donne, età media 50 anni) nell'arco di un anno ha mostrato un'ottima durata del prodotto.

Il grafico n. 1 mostra la durata del trattamento nei tre differenti dosaggi. Dai questionari di gradimento compilati dagli specialisti coinvolti nello studio deriva un indice di soddisfazione medio (ASI) di pazienti e dottori di 8/10 in un anno. I parametri presi in considerazione nel questionario sono la buona malleabilità e la tollerabilità del prodotto, l'effetto immediato, il dolore durante il trattamento che è risultato essere inesistente o se presente comunque sopportabile, l'assenza di edema (grafico n. 2).

### 1. DURATION OF TREATMENT

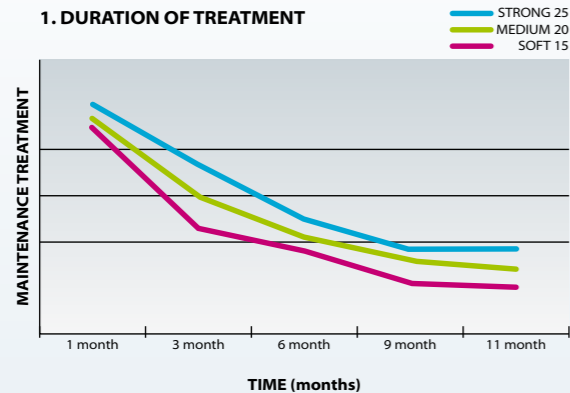


## CLINICAL TRIALS

A preclinical trial conducted by ten specialists (dermatologists, plastic surgeons, and cosmetic physicians) on 145 patients (women with a mean age of 50 years) over the course of one year has shown an excellent durability of the product.

The graph n. 1 shows the duration of the treatment with the three dosages. The satisfaction questionnaires filled out by the specialists involved in the study showed an average satisfaction index (ASI) of 8/10 for both patients and physicians. The parameters taken into the consideration in the questionnaire were the malleability and tolerability of the product, its immediate effect, pain during the treatment (which resulted to be non-existent or tolerable), and the absence of oedema (graph n. 2).

### 2. AVERAGE INDEX OF SATISFACTION

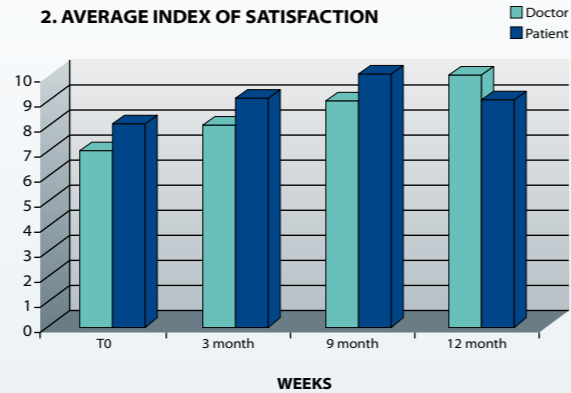

## RISULTATI

Tre differenti dosaggi, consentono di trattare tutte le aree del viso, riducendo tutti i tipi di rughe (sottili, profonde) e rimodellando l'ovale e le labbra reidratando la pelle in profondità.

Il risultato è molto naturale e visibile immediatamente, EVRYAL genera un effetto lifting immediato grazie alle intrinseche proprietà viscoelastiche ed idrofile consentendo di ricreare i volumi desiderati.

EVRYAL viene iniettato sotto cute con lo scopo di eliminare o comunque ridurre rughe sia superficiali che profonde, per aumentare il volume dei tessuti molli (labbra, zigomi, guance) per meglio delineare i contorni del viso (face contouring) o per fini ricostruttivi (cicatrici depresse, esiti di acne e varicella, asimmetrie ed atrofie facciali, rinoplastica non chirurgica). Si ottiene così un buon risultato duraturo, sicuro, considerando che il riassorbimento avviene gradualmente nell'arco di 6-8 mesi dal trattamento. Si può ripetere il trattamento in tutta sicurezza dopo che gli effetti del riempimento si sono attenuati notevolmente. La semplicità d'uso e la sicurezza intrinseca del prodotto agevolano il medico nell'esecuzione del trattamento. Il medico pratica poche microiniezioni di prodotto nelle aree da trattare, dopo un'accurata de-terzione e disinfezione della cute. Il trattamento è ben tollerato e, generalmente, poco doloroso.



## RESULTS

Three different dosages allow for the treatment of any area of the face, reducing any type of wrinkle (fine to deep), reshaping the face contour and lips, and hydrating the skin in depth.

The result is very natural and immediately visible. EVRYAL has an immediate lifting effect, thanks to its intrinsic viscoelastic and hydrophilic properties, which help recreate the desired volume.

EVRYAL is injected subcutaneously to eliminate or at least reduce both superficial and deep wrinkles and increase soft tissue volume (lips, cheekbones, cheeks) for face countouring or reconstructive procedures (depressed scars, acne or chicken pox outcomes, facial asymmetry and atrophy, non-surgical rhinoplasty). This allows for safe, long-lasting results, considering that resorption occurs gradually over 6 to 8 months from treatment. The treatment can be safely repeated once the filling effects are significantly attenuated.

Ease of use and intrinsic safety facilitate the physician performing the treatment. After thorough cleansing and disinfection of the skin, a few microinjections in the areas to be treated is all it takes. The treatment is well tolerated and not painful.





Trattamento di rughe periorcari. Come tecnica di iniezione si consiglia l'iniezione lineare retrograda, che deve calcare con estrema precisione il decorso superficiale della ruga. Vanno evitate le ipercorrezioni. Per eseguire tale tecnica occorre tendere la pelle con le dita della mano che non tiene la siringa evitando accuratamente i capillari evidenziati in superficie. Dopo l'impianto è importante massaggiare la superficie trattata al fine di meglio distribuire il prodotto sotto cute.



Treatment of periorcular wrinkles. We recommend the linear retrograde injection technique, which should trace the path of the wrinkle with extreme precision. Avoid hypercorrections. This technique requires stretching the skin between the fingers of the hand not holding the syringe, carefully avoiding surface capillaries. After the injection, it is important to massage the treated area to spread the product subcutaneously.

CONCENTRAZIONE	15 mg/ml	CONCENTRATION	
PH	6.00 – 7.50	PH	
PESO MOLECOLARE DELL'ACIDO IALURONICO DI PARTENZA	2,400-4,000 kDa	INITIAL HYALURONIC ACID MOLECULAR WEIGHT	
ENDOTOSSINE TOTALI	< 0.5 EU/ml	TOTAL ENDOTOXINS	
INDICAZIONI D'USO	Trattamento delle rughe periorcari	Treatment of periorcular wrinkles	INDICATIONS
ZONA D'INIEZIONE	Derma medio profondo, sottomucosa labiale	Medium-deep dermal layer, labial submucosa	INJECTION AREA
AGENTE RETICOLARE	BDDE	CROSS-LINKING AGENT	
QUANTITÀ PER ASTUCCIO	Siringa sterile 1x1 mL Sterile syringe	ONE BOX CONTAINS	
DURATA DEI RISULTATI	Mesi 6-8 Months	DURATION OF RESULTS	
AGHI	2x30G 1/2"	NEEDLES	
STERILIZZAZIONE	Autoclave	STERILIZATION	
	DISPOSITIVO MEDICO CE 0373	MEDICAL DEVICE CE 0373	



SOFT



Trattamento di rughe periorali, è inoltre indicato per volumizzare il contorno delle labbra e le sopracciglia. L'impianto è effettuato a livello del derma superficiale, evitando ipercorrezioni. Eventuali correzioni possono essere effettuate sia con la tecnica dei microponfi sequenziali che la lineare retrograda, a seconda della manualità dell'operatore. Si consiglia di massaggiare con decisione le parti trattate.



Indicated for the treatment of perioral wrinkles and for lip and eyebrow contouring. The product is injected into the superficial dermis, avoiding hypercorrections. If necessary, the physician can perform corrections with both the serial puncture and linear retrograde techniques, according to her dexterity. We recommend massaging the treated parts.

CONCENTRAZIONE	20 mg/ml	CONCENTRATION	
PH	6.00 - 7.50	PH	
PESO MOLECOLARE DELL'ACIDO IALURONICO DI PARTENZA	2,400-4,000 kDa	INITIAL HYALURONIC ACID MOLECULAR WEIGHT	
ENDOTOSSINE TOTALI	< 0.5 EU/ml	TOTAL ENDOTOXINS	
INDICAZIONI D'USO	Trattamento delle rughe e del contorno labbra	Treatment of perioral wrinkles	INDICATIONS
ZONA D'INIEZIONE	Derma preferibilmente lo strato più profondo	Possibly the deepest dermal layer	INJECTION AREA
AGENTE RETICOLARE	BDDE	CROSS-LINKING AGENT	
QUANTITÀ PER ASTUCCIO	Siringa sterile 1x1 mL Sterile syringe	ONE BOX CONTAINS	
DURATA DEI RISULTATI	Mesi 4-6 Months	DURATION OF RESULTS	
AGHI	1x27G 1/2" - 1x26G 1/2"	NEEDLES	
STERILIZZAZIONE	Autoclave	STERILIZATION	
DISPOSITIVO MEDICO CE 0373		MEDICAL DEVICE CE 0373	





Trattamento di rughe medio profonde del viso, aumento volumetrico degli zigomi, mento, dorso del naso, e labbra. Tecnica lineare retrograda, da preferire a quella dei micro-ponfi sequenziali. Si consiglia di iniettare il prodotto a livello del derma profondo.



Treatment of medium to deep face wrinkles, volume augmentation of cheekbones, chin, nose bridge, and lips. The linear retrograde technique should be chosen over the serial puncture technique. We recommend injecting the product into the deep dermal layer.

CONCENTRAZIONE	25 mg/ml		CONCENTRATION
PH	6.00 - 7.50		PH
PESO MOLECOLARE DELL'ACIDO IALURONICO DI PARTENZA	2,400-4,000 kDa		INITIAL HYALURONIC ACID MOLECULAR WEIGHT
ENDOTOSSINE TOTALI	< 0.5 EU/ml		TOTAL ENDOTOXINS
INDICAZIONI D'USO	Trattamento delle rughe facciali profonde	Treatment of deep facial wrinkles	INDICATIONS
ZONA D'INIEZIONE	Ipoderma profondo o sopraperiostiale	Deep or supraperiosteal hypodermis	INJECTION AREA
AGENTE RETICOLARE	BDDE		CROSS-LINKING AGENT
QUANTITÀ PER ASTUCCIO	Siringa sterile 1x1 mL	Sterile syringe	ONE BOX CONTAINS
DURATA DEI RISULTATI	Mesi 6-8 Months		DURATION OF RESULTS
AGHI	1x27G 1/2" - 1x26G 1/2"		NEEDLES
STERILIZZAZIONE	Autoclave		STERILIZATION
	DISPOSITIVO MEDICO CE 0373	MEDICAL DEVICE CE 0373	



STRONG ■■■

STRONG